

የሰጠ መሰብሰቢያ መሳሪያ ይዘት፡

- ሶስት (3) – 8 x 10 ፕላስቲክ ባህርባዊ ማሳሪያ ክፍሎች
- አንድ (1) - ቀይ ፈሳሽ ያለው ትቦ
- አንድ (1) - ባዶ ኩባያ
- አንድ (1) - የሚጣል መቆንጠሪያ
- አንድ (1) – DCLS ማስተላለፊያ ፎርም
- አንድ (1) - የመሰብሰቢያ መመሪያ ፎርም
- አንድ (1) - የወረቀት ሰጠ መሰብሰቢያ መሳሪያ
- ሁለት (2) - የትቦ ላይ ጽሁፎች

የሰጠውን ናሙና መሰብሰብ፡ (ስላሎችን ለማየት ከጀርባ ያለውን ይመልከቱ)


1. ቀጥሎ ያለውን የ DCLS ክሊኒካዊ ማይክሮባዮሎጂ/ቫይሮሎጂ መጠየቂያ ፎርም ይሙሉ፡

A. የታካሚው መረጃ ሳጥን	B. የታካሚ ጤና ታሪክ ሳጥን	C. የጀርባው ገጽ ራስጌ
1. የእርስዎ ስም	1. የታዩ ምልክቶች	1. የእርስዎ ስም
2. የልደት ቀን	2. ምልክቶች መታየት የጀመሩበት ቀን (የጅማራ ቀን)	2. የልደት ቀን
3. እድሜ		
4. ጾታ		
5. አድራሻ		
6. ዘር/ብሄር		

- እስከቢርቶ ወይም ማርከር በመጠቀም፣ ስምዎን፣ የልደትዎን ቀን እና በመጻፊያው ላይ ያለውን የተሰበሰበበትን ቀን እና ቦታ ማለትም በባዶው ኩባያ እና ቀይ ፈሳሽ ያለበት ትቦ ላይ ይጻፉ፡፡
- ሰጠ ከመሰብሰብ በፊት በመጀመሪያ ሽንትዎን ይሽኑ ይህም ሽንት ከሰጠው ጋር እንዳይደባለቅ ለማድረግ ነው፡፡ ሰጠ በመሰብሰብበት ወቅት ሽንትዎን አይሽኑ፡፡ ከሰጠው ጋር ውሀ፣ ሶፍት ወይም ሳሙና አይደባልቁ፡፡
- ሰጠው ኢንፌክሽን ሊያሰራጩ የሚችሉ ጀርሞች ሊኖርበት ይችላሉ፡፡ **ሰጠ መከሰብሰብ በፊት እና በኋላ እጅዎን መታጠብን አይዘንጉ፡፡**
- የወረቀት ሰጠ መሰብሰቢያ መሳሪያውን ጠፍጣፋ በሆነው ቦታ ላይ ያድርጉ ከዚያም የጎኖቹን ክንፎች ይጠፉ፡፡
- በመሰብሰቢያው እቃ ላይ ያለውን የሚያጣብቀውን ማጣበቂያ ይላጡ፡፡
- የተጋለጠውን ማጣበቂያ በመቀመጫው የላይኛው ክፍል ላይ ያድርጉ፡፡ መሰብሰቢያው መሳሪያ ከመቀመጫው በታች እንደተቀመጠ እርግጠኛ ይሁኑ፡፡
- የመሳሪያውን መከካል በመጫን ጎድጓዳ ቅርጽ ይስሩ፡፡ በጎድጓዱ ቅርጽ ውስጥ ሰጠዎን ያስገቡ፡፡ በመሰብሰቢያው ውስጥ ሽንት አንደማይገባ እርግጠኛ ይሁኑ፡፡
- ባዶ የሆነው ኩባያ ውስጥ ሰጠውን ለማስተላለፍ መሳሪያው ውስጥ ያለውን መቆንጠሪያ ወይም ቀይ ፈሳሽ ያለበትን ትቦ ጥቅም ላይ በማዋል ባዶው ኩባያ ውስጥ ያስተላልፉ፡፡ ሰጠ መሰብሰብ ያለበት ከመሰብሰቢያው እቃ ውስጥ ብቻ ነው፡፡ ከሽንት ቤት መቀመጫው ውስጥ በምንም አይነት መንገድ አይቆንጥሩ፡፡ ኩባያውን ከ 1/2 እስከ 3/4 ይሙሉት፡፡ ከመጠን በላይ አይሙሉት፡፡ ግጥሙን ጥብቅ አድርገው ይግጥሙት፡፡
- መምጣጫ ጨርቅ ባለው የ ፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ ሰጠው ያለበትን ኩባያ ይክተቱት፡፡ ጀርባው ላይ ያለውን ያላቁ እና ማጣበቂያውን ገልጠው ሰማያዊውን ማጣበቂያ በመጫን ከረጢቱን ለመዝጋት ጥቅም ላይ ያውሉ፡፡
- ከአንድ ጥቅም በኋላ የሚጣለውን መቆንጠሪያ ወይም ቀይ ፈሳሽ ያለበትን ትቦ ሰጠውን ለማስተላለፍ ጥቅም ላይ ያውሉ፡፡ በመያዣው ውስጥ ያለው ቀይ ፈሳሽ ሞልቷል የሚለው ምልክት ላይ እስከሚደርስ ድረስ ኩባያውን ይሙሉት፡፡ መክደኛውን በደንብ አድርገው ገጥመው ይዝጉ፡፡ ቀይ ፈሳሽ ያለውን ትቦ መምጣጫ ካለው ከሁለተኛው የፕላስቲክ ከረጢት አጠገብ አድርገው ይክተቱ፡፡ ከጀርባ ያለው በማንሳት እና ሰማያዊውን ማጣበቂያ በመጫን ከረጢቱን ይዝጉ፡፡
- ሰጠው ያለባቸውን 2 ከረጢቶች በሶስተኛው ከረጢት ውስጥ ይክተቱ፡፡ በፊተኛው ኪስ ውስጥ አረንጓዴውን የማስተላለፊያ ፎርም ያስገቡ እና ግጥሙን ይዝጉ፡፡
- የሚቀረውን ሰጠ የያዘውን ከረጢት አራቱን የማጣበቂያ ነጥቦች በማላቀቅ ያስወግዱ፡፡ የሚቀረውን ሰጠ እና መያዣ ያስወግዱ፡፡
- የመሰብሰቢያውን መሳሪያ እና ካርድ ቦርድ ያስወግዱ፡፡ የመሰብሰቢያውን መሳሪያ እና መቆንጠሪያውን ማንኪያ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጣሉ፡፡ **እጅዎን በደንብ አድርገው ይታጠቡ፡፡**

መጠቅለል፣ ማስቀመጥ እና ማንሳት፡

- 2 የሰጠ ማስቀመጫዎች ያሉት ከረጢት በማቀዝቀዣ ውስጥ ሊቀመጥ ያስፈልጋል ይህም በጤና ዲፓርትመንት ለመወሰድ ዝግጁ እስከሚሆን ድረስ ነው፡፡ **ናሙናዎችን አያድርቁ፡፡**
- ናሙናዎች ለመወሰድ ዝግጁ በሚሆኑበት ወቅት ወይም ምንም አይነት ጥያቄ ከመሰብሰብ ጋር በተያያዘ ካለዎት አካባቢያዊ ጤና ዲፓርትመንትዎን ያግኙ፡፡

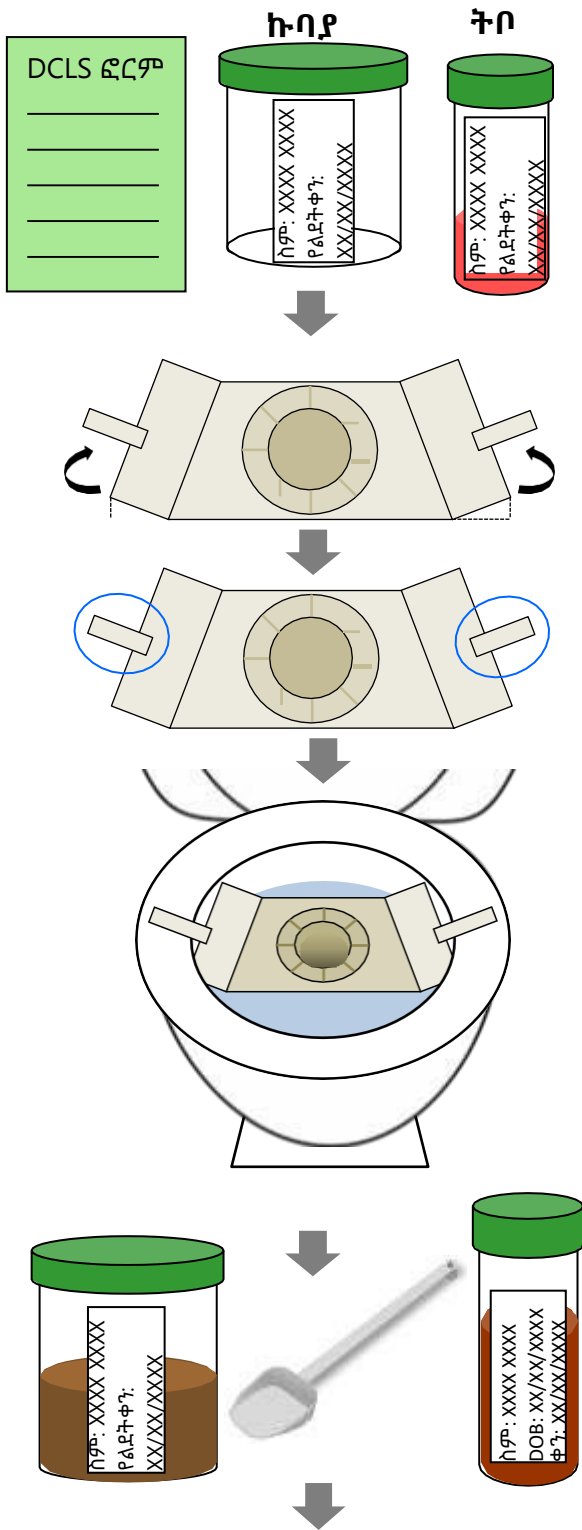

1

- የ DCLSን ክሊኒካዊ ትክክለኛ ማይክሮ ባዮሎጂ/ቫይሮሎጂ መጠየቂያ ፎርም ይሙሉ።
- ስምዎትን፣ የልደት ቀንዎን እና ናሙናው የተሰበሰበበትን ቀን ሁለቱም መያዣዎች ላይ ይጻፉባቸው።

2

መሰብሰቢያውን መሳሪያ ጠፍጣፋ በሆነ ቦታ ላይ ያድርጉ እና እጅጌዎቹን ይዝጉ።

3

በሁለቱም ጎኖች ላይ ያለውን ማጣበቂያ ላይ ያለውን መከላከያ ይላጡ (ሰማያዊ ክፍሎቹ ላይ)

4

- መሰብሰቢያውን በሽንት ቤት መቀመጫው ውስጥ ያስገቡ ይህም ወደ መጨረሻው ክፍል ማለት ነው። በሽንት ቤት መቀመጫው ላይ የተጋለጠውን ማጣበቂያ ያያይዙ። መሰብሰቢያው መሳሪያ ከሽንት ቤት መቀመጫው በታች እንደሆነ ሊያረጋግጡ ያስፈልጋል።
- መሰብሰቢያውን መሳሪያ በጎድጓዳ ቅርጽ ያጎድጉዱ።
- በሰህኑ ውስጥ ሰረገራውን ያስገቡ። የሚከተለውን አያደርጉ በጎድጓዳው ውስጥ ሽንትዎን መሸናት።

5

- በመሳሪያው ውስጥ ያለውን የቆሻሻ መጣያ ጥቅም ላይ በማዋል፣ ከሰህኑ ላይ ሰገራውን ያንሱ እና ባዶ የሆነው ሰህን ውስጥ ያስገቡ። ኩባያውን ከ 1/2 እስከ 3/4 ይሙሉት። ከመጠን በላይ አይሙሉት። አጥብቀው መክደኛውን ይዝጉ።
- ራሱን መቆንጠሪያ ጥቅም ላይ በማዋል፣ ሰገራውን ከመሰብሰቢያው ላይ አንስተው ከቀይ ፈሳሽ ባለበት ትቦ ውስጥ ያስገቡ። ትቦው ውስጥ “የመሙያው መስመር” ድረስ ያስገቡ። ከመጠን በላይ አይሙሉት። አጥብቅ ይግጠሙ እና በደንብ አድርገው ይደባልቁ።

6

- ሰገራ ብቻ ያለበትን ናሙና በትልቅ የፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ ያስገቡ። ቀጭኑን ልጥፍ አንስተው ማጣበቂያው እንዲታይ ያድርጉ እና ሰማያዊውን በመጨረሻ ይግጠሙት። ምንም አይነት አየር በከረጢቱ ውስጥ እንደማይገባ እርግጠኛ ይሁኑ።
- ሰገራው ያለበትን እና ቀይ ፈሳሽ ያለበትን ትቦ ለብቻው በከረጢት ውስጥ ያስገቡ።
- 2 ቱንም የተዘጉ ከረጢቶች አንድ ላይ አድርገው በሰስተኛ የፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ ያስገቡ። የተጠናቀቀውን አረንጓዴ የ DCLS ፎርም በፊተኛው ኪስ ውስጥ ያስገቡ እና እጅጌዎቹን ይጠፉ።
- የሰገራ ናሙናው ያለበትን ከረጢት ፍሪጅ ውስጥ ይክተቱት። አያደርቁት።
- ናሙናው ከእጅዎ ላይ እንዲነሳ አካባቢያዊ የጤና ዲፓርትመንትዎን ያግኙ።

